



IMPAX EE CD Viewer R20 XVIII

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Informationen	3
2 Wichtige Warnhinweise	5
3 Systemvoraussetzungen	6
4 Kurzanleitung öffnen	7
5 Rundgang Image Area	8
Index	12

Rechtliche Informationen

1

Copyright

Copyright © 2019 by AGFA HealthCare N.V, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgium.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung von AGFA HealthCare weder vollständig noch auszugsweise kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in eine elektronische oder maschinenlesbare Form übertragen werden.

Trademarks

Windows® XP und Windows® 7 sind Marken von Microsoft Corporation.

IMPAX® EE ist eine Marke von AGFA®HealthCare, N.V.

Java ist eine Marke der Oracle Corporation.

Weitere Informationen über AGFA-Produkte und AGFA HealthCare-Produkte erhalten Sie unter www.agfa.com/healthcare, Ihrer Informationsadresse.

Haftungsausschluss

Die AGFA HealthCare bürgt weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder den Nutzen der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und lehnt ausdrücklich jede Garantie für die Eignung zu irgendeinem besonderen Zweck ab. Die AGFA HealthCare haftet in keiner Weise für Schäden aufgrund der Verwendung oder Unbrauchbarkeit jedweder in diesem Handbuch angegebenen Informationen, Vorrichtungen, Methoden oder Verfahren.

Änderungsvorbehalt

Die Agfa HealthCare behält sich das Recht zur Änderung dieses Handbuches ohne vorherige Ankündigung vor.

Letzte Aktualisierung dieses Handbuches: 2019.03.08

Hersteller

AGFA HealthCare N.V.

Septestraat 27

B-2640 Mortsel

Belgien



Herstellergewährleistung

Der Hersteller, Händler oder Montagetechniker übernimmt die Verantwortung für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Geräte/Software nur, wenn

- die Installation, Modifikation, Anpassung, Änderung oder Reparatur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt wird,
- die Elektroinstallationen der Umgebung, in welcher die Geräte/Software benutzt werden, den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen,
- die Geräte/Software gemäß den Anweisungen in den Benutzerhandbüchern benutzt werden.

Wichtige Warnhinweise

2

Verwendung des IMPAX EE CD Viewers

Der IMPAX EE CD Viewer darf NICHT zur Diagnosestellung oder zu chirurgischen Vorbereitungen herangezogen werden.

Messergebnisse

Die Messergebnisse sind anhand der rechts im Bild eingeblendeten Skala und des anatomischen Aufbaus auf Plausibilität zu überprüfen.

Systemvoraussetzungen

3

Komponente	Mindestens
RAM	2 GB
Betriebssystem	Windows XP oder neuer
Minimalauflösung der Bildschirme	1024x768 (unter den Minimalvoraussetzungen wird der IMPAX EE CD Viewer zur Gänze angezeigt, allerdings wurde die Schaltfläche zum Leeren des Bildbereichs für die Minimalauflösung entfernt)

Kurzanleitung öffnen

4

Zusätzlich zu dieser Publikation finden Sie in der Applikation eine praktische Kurzanleitung zum CD-Viewer.


Um die Kurzanleitung für den CD-Viewer zu öffnen

1. Klicken Sie auf das Fragezeichen in der linken oberen Ecke der Applikation.

Rundgang Image Area

5


Übersicht Image Area (Bildbereich)

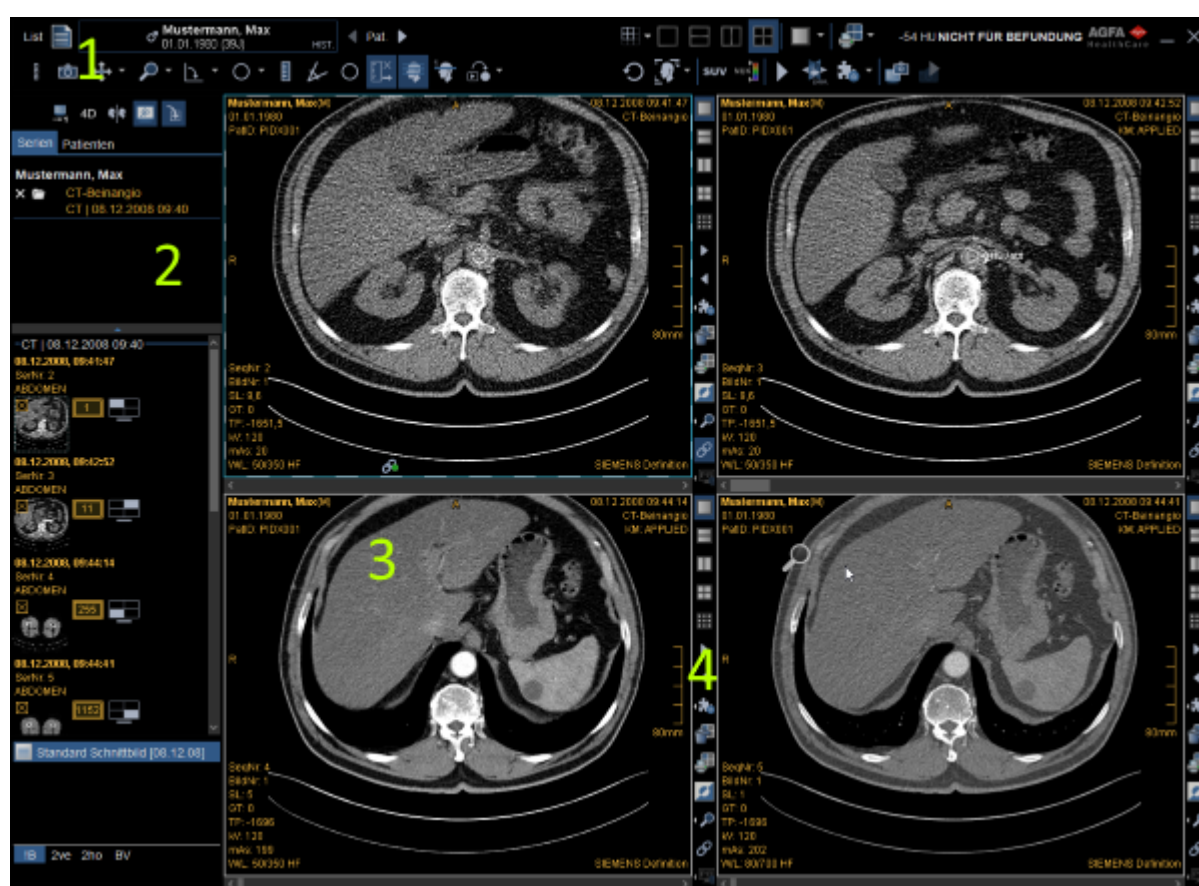

Nr.	Name	Beschreibung
1	Top-Toolbar	<p>Patientenname, Werkzeuge für die Bilddarstellung, Bildbearbeitung, und Navigation.</p> <p>Der Benutzer kann bei entsprechender Berechtigung die enthaltenen Werkzeuge und deren Darstellungsgröße bestimmen.</p>

Nr.	Name	Beschreibung
2	Serienpalette	<p>Die Serienpalette hat oben fünf Schaltflächen und darunter zwei Register:</p> <p>Register Serien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studiengruppierung (Studien eines Patienten) • Serienvorschau • Aufhängungen / Schnappschüsse <p>Register Patienten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hier werden alle geladenen Patienten angezeigt. <p>Die Serienpalette kann fix angezeigt werden, ganz ausgeblendet werden, erst bei Randberührung mit der Maus eingeblendet werden, als autonomes Fenster bereitgestellt werden. Sie kann seitlich oder am unteren / oberen Bildschirmrand angeordnet werden.</p>
3	Serien-Anzeige	<p>Auf jedem Bildschirm können 1 -64 Serien gleichzeitig angezeigt werden.</p> <p>Von jeder Serie können 1-64 Einzelbilder gleichzeitig angezeigt werden.</p>
4	Toolbar Serien-Anzeige	<p>Bei jeder Serienanzeige kann rechts, links, oben oder unten eine eigene Werkzeugleiste (Toolbar) angezeigt werden.</p> <p>Der Benutzer kann die enthaltenen Werkzeuge bestimmen.</p>

Übersicht Serien-Anzeige

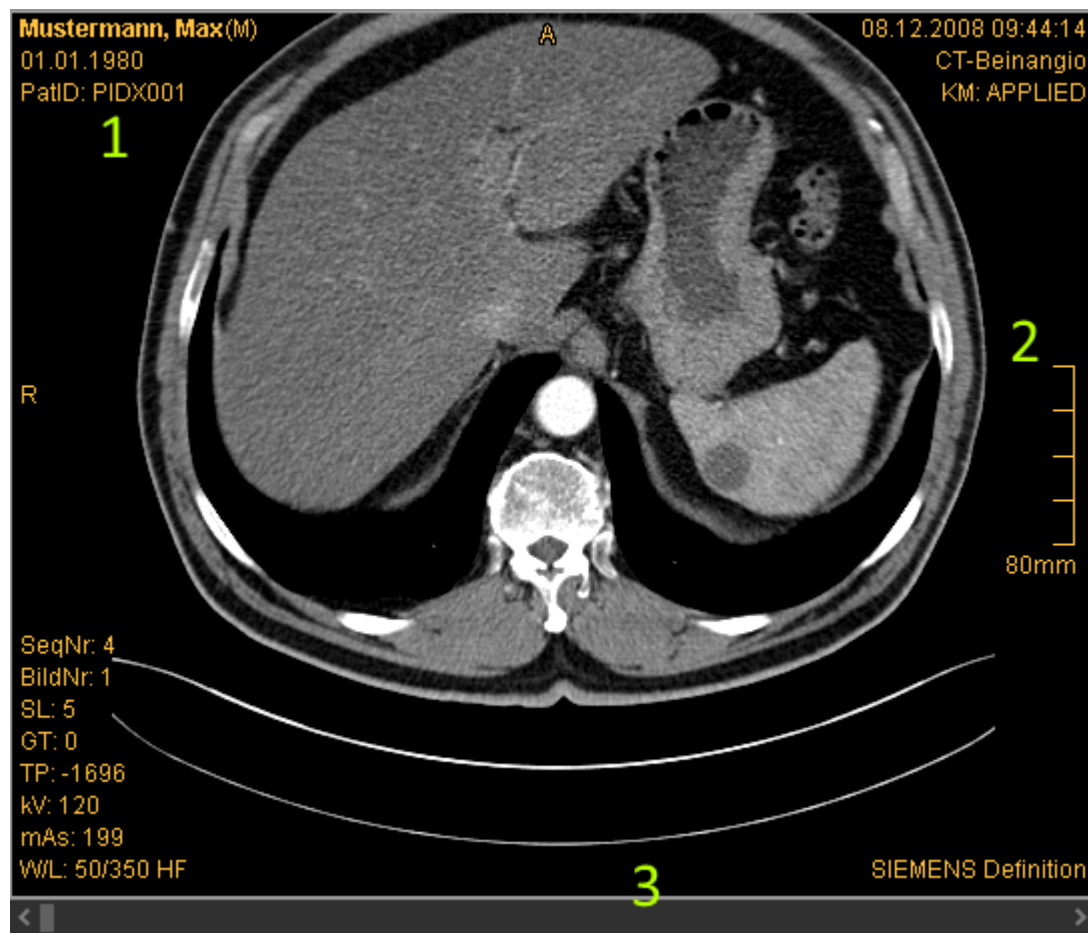

Nr.	Name	Beschreibung
1	Patientendaten	Patientendaten, technische und auftragsbezogene Daten, Daten der Modalität, Patienten-Orientierung
2	Lineal	Lineal und Kalibrierungsinformation
3	Scrollbar	Damit kann jedes Bild schnell erreicht und genau angesteuert werden.

Rahmen der Serien-Anzeige

Der Rahmen zeigt auch die Zustände **selektiert**, **aktuell** und **synchronisiert** an.

Alle Aktionen werden nur an selektierten Bildern durchgeführt.

Verschiedene Rahmen (Vergrößerung):



Nr.	Farbe	Beschreibung
1	Hellgrau	Bilder sind selektiert (standard beim Öffnen: alle Bilder einer Serie sind selektiert).
2	Dunkelgrau	Bilder sind nicht selektiert (deselektiert per Shortcut).
3	Blaugrün strichliert	Serien-Anzeige ist aktuell (mit linker oder rechter Maustaste angeklickt).
4	Hellblau	Serien-Anzeige ist synchronisiert .

Index

I

Image-Area

Rundgang.....	8
Überblick.....	8

R

Rechtliche Informationen

Änderungsvorbehalt.....	3
CE-Zeichen.....	3
Copyright.....	3
Haftungsausschluss.....	3
Hersteller.....	3
Herstellergewährleistung.....	3
Trademarks.....	3

Rundgang

Image-Area.....	8
-----------------	---

S

Systemvoraussetzungen

Empfohlene Grundausstattung.....	6
Minimalausstattung.....	6

U

Überblick

Image-Area.....	8
-----------------	---

W

Wichtige Warnhinweise

Messergebnisse.....	5
Verwendung.....	5



Details as of PDF Creation Date

Document Metadata

Title:	IMPAX EE CD Viewer R20 XVIII PDF Deutsch
Livelink ID:	67695879
Version#:	2
Version Date:	2019-03-08 02:11 PM CET
Status:	Approved on 2019-03-11 09:02 AM CET
Owner:	Balint Kelen (axfja)
Created By:	Balint Kelen (axfja)
Created Date:	2019-01-30 04:27 PM CET
PDF Creation Date:	2019-03-11 09:03 AM CET

This document was approved by:

Signatures:

1. Samuel Imriska (awtii) on 2019-03-11 08:37 AM CET
2. Marie-Theres Tschurlovits (apumw) on 2019-03-08 03:04 PM CET

Detailed Approver History:

- **Approval Workflow started on 2019-03-08 02:12 PM CET**
 - Approval task originally assigned to and completed by Marie-Theres Tschurlovits (apumw) on 2019-03-08 03:04 PM CET
 - Approval task originally assigned to and completed by Samuel Imriska (awtii) on 2019-03-11 08:37 AM CET

Version & Status History

Version#	Date Created	Status
2	2019-03-08 02:11 PM CET	Approved - 2019-03-11
1	2019-01-30 04:27 PM CET	Approved - 2019-02-05